

| Вид на химикала | Наименование на химикала | Производител | Трансректален трансдюсер | | | Повърхностен трансдюсер | Утвърдено време за контакт |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | EV29L | EV9C SN 6750- | EV9C SN 6087- | EV5C | |
| Почистващ продукт | CIDEZYME® | Advanced Sterilization Products | ✓ | ✓ | ✓ | × | 1 минута |
| | ENZOL® | Advanced Sterilization Products | ✓ | ✓ | ✓ | × | 1 минута |
| Висококачествен дезинфектант | CIDEX® OPA | Advanced Sterilization Products | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 минути |
| | CIDEX® | Advanced Sterilization Products | ✓ | ✓ | ✓ | × | 45 минути |
| | Revital-Ox™ Resert® | Steris Corporation | ✓ | ✓ | × | ✓ | 8 минути |
| | UltrOx™ | CIVCO Medical Solutions | ✓ | ✓ | × | ✓ | 8 минути |
| Спрей за избърсване/напръскване | Transeptic® Spray | Parker Laboratories | × | × | × | ✓ | 30 секунди |
| | Tristel Trio | Tristel Solutions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 секунди (спороциден ефект) |

* Администрацията по храните и лекарствата (FDA) е приела "Metricide Activated Dialdehyde Solution", произведен от Metrex Research, Inc. (2,6% глутаралдехид, с повторна употреба след 14 дни) като идентичен на Cidex®.

Таблица 1: Списък с одобрени химикали


Изображенията по-долу показват нивото на потапяне на трансдюсерите.



Фигура 1: Ниво на потапяне на EV29L



Фигура 3: Ниво на потапяне на EV5C

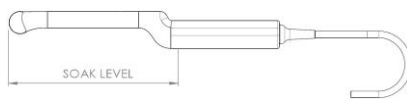

Фигура 2: Ниво на потапяне на EV9C

ВНИМАНИЕ

EN-C25



Не потапяйте трансдюсера над нивото на потапяне.

Използвайте продукти за почистване и дезинфекция, които са одобрени за употреба във Вашия регион.

ЗАБЕЛЕЖКА



Спазвайте инструкциите за употреба на дезинфектантите и почистващите препарати, дадени от производителя.

Вижте Ръководството за поддръжка, почистване и употреба на Вашия трансдюсер относно инструкции за повторната му обработка между отделните пациенти и местоположението на нивото на потапяне.



Exact Imaging Inc.
7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



EDAP TMS
4, rue du Dauphiné
69120 Vaulx-en-Velin
France



Търговски марки

Търговски марки на Exact Imaging

- ExactVu™

CIDEZYME®, CIDEX® and ENZOL® са регистрирани търговски марки на Johnson & Johnson. Revital-Ox™ е търговска марка на Steris Corporation. Resert® е регистрирана търговска марка на Steris Corporation.

Transeptic® е регистрирана търговска марка на Parker Laboratories Inc.

UltrOx™ е търговска марка на CIVCO Medical Solutions.

Каталожни номера на Exact Imaging

- EV-29L: Трансдюсер EV29L
- EV-9C: Трансдюсер EV9C
- EV-5C: Трансдюсер EV5C
- EV-SYS-220: Система за микроултразвуково изобразяване ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Система за микроултразвуково изобразяване ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Система за микроултразвуково изобразяване ExactVu™ (100V)

Информация за версията

Система: Система за микроултразвук с висока разделителна способност ExactVu™

Списък на одобрените химикали за трансдюсери ExactVu™, редакция 2.0 (BG), оригинални инструкции

